

W-308

Massage infrarouge



Intelligence infrarouge Bracelet anti-ronflement

Sleep Connection est un révolutionnaire appareil conçu pour réduire le ronflement grâce à une nouvelle stimulation nerveuse processus. Il dispose d'un spécialement biocapteur conçu qui détecte ronflement, une douce, électrique de 4 secondes l'impulsion sera envoyée automatiquement à stimuler les nerfs de la peau du ronfleur. Puis le cerveau détecte ce nerf stimulation et rappelle ou entraîne le ronfleur pour changer la position de sommeil, réduisant ainsi le ronflement.


- Pas d'effets secondaires
- Pouls régulier sans perturber le sommeil normal
- Détecte automatiquement les ronflements
- Non affecté si des boutons sont enfoncés pendant le sommeil
- Mise hors tension automatique après 8 heures d'activation

 **SLEEP**
CONNECTION

Manuel d'instructions de l'utilisateur



W-308

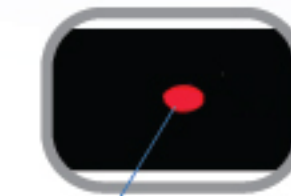

Massage infrarouge



www.sleepconnectionstore.com

support@sleepconnectionstore.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Emballage en film conducteur ouvert inclus dans votre boîte Sleep Connection.
- Fixez le film aux coussinets en caoutchouc conducteurs noirs à l'arrière du bracelet anti-ronflement Sleep Connection.
- Mettez le bracelet.
- Test: allumez l'interrupteur et réglez-le sur la position 1, attendez que le voyant DEL devienne vert.
- Vérifiez que le voyant LED fonctionne correctement et appuyez lentement trois fois sur le bouton de test de pression. Environ 5 secondes plus tard, vous ressentirez un pouls faible.
- Prêt à l'emploi: la sensibilité du pouls diffère d'une personne à l'autre. Choisissez l'intensité qui vous convient.

(Remarque: n'utilisez pas cette machine si le bruit intérieur ou de fond est supérieur à 45 dB. Il n'y a pas d'impulsion si le bruit est supérieur à 45 dB)

AVERTISSEMENT!

Sleep Connection ne convient pas aux personnes ayant un stimulateur cardiaque ou un autre implant médical avec des composants électroniques.

DÉPANNAGE

Si le voyant d'état n'est pas brillant ou s'il n'y a pas de réponse, veuillez vérifier le

- Les piles sont-elles installées correctement?
- Les piles doivent-elles être remplacées?
- Si A et B sont terminés et que vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter support@sleepconnectionstore.com

INCLUS DANS LE FORFAIT

- 1 x dispositif anti-ronflement Sleep Connection
- 1 x bracelet
- 1 x manuel en anglais
- 1 x outil
- 1 x film conducteur

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Spécification
Intensité de sortie: 180uA
Forme de sortie principale: 0,2 HZ fixe
La forme d'onde de sortie: nombre fixe de sortie d'onde carrée
Temps de service: 8 heures (arrêt automatique)
Alimentation: 1,5 piles AAA (pour la section de la batterie)
Environnement de fonctionnement: 10 °C ~ + 40 °C 30 ~ 85% HR °C
Environnement de stockage: -20 °C ~ + 50 °C 10 ~ 95% HR
Environnement de transmission: -10 °C ~ + 50 °C 30 ~ 85% HR

Remarque: vous serez informé de la conception du produit

Bruit de fond intérieur	Dialogue court et autres bruits au-dessus de 65 d B	Ronflement de plus de 65 jours B
Au-dessus de 65 d B (à moins de 50 cm du téléviseur)	Arrêter la sortie	Arrêter la sortie
60 d B (à 1 m du téléviseur)	Rarement sortie	Production
55 d B (à moins de 1 m du climatiseur)	Rarement sortie	Production
En dessous de 50 d B	Pas de sortie	Production